


体重測定用紙

体重計の表示：73.5kg
服装（風袋）：1.0kg

DWと【前】体重は**裸の体重**
(風袋分は予め登録してあり自動で引かれる)

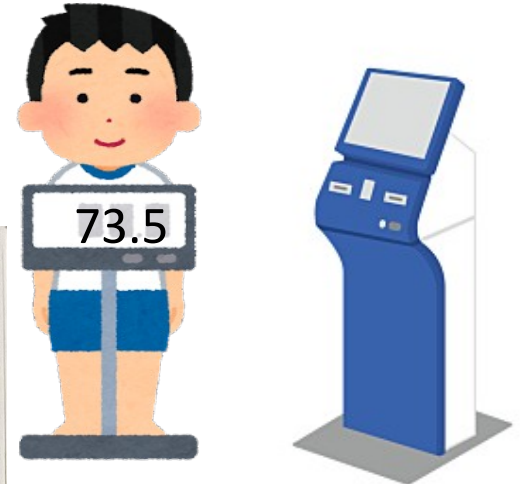

2024/02/17 (土) 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo : 06
透析時間 : 4時間00分
DW : 70.0 kg
【前】体重 : 72.5 kg
除水目標値 : 2.7 kg
引き残し : 0.0 kg

除水目標値=除水量設定



透析経過時間 0:47

項目	値
静脈圧	77 mmHg
透析液圧	97 mmHg
除水量積算	0.58
除水量設定	2.70
除水速度	0.75 L/h

最高血圧 145 mmHg
最低血圧 73 mmHg
脈拍 54 bpm
測定 14:31

測定時刻	最高	最低	平均	脈拍
2 13:51	159	71	102	55
3 14:02	180	79	117	58
4 14:11	162	75	108	57
5 14:21	160	77	105	58
6 14:31	145	73	111	54

自動測定待ち (3 分)

IP速度 2.0 [20mL] mL/h
透析液温度 36.0 °C
透析液濃度 14.2 mS/cm
透析液流量 500 mL/min
血流量 180 mL/min

緊急補液 0.00L
返血 (D-FAS)

連続測定
自動測定 10分間隔
開始

HD IP 計算 D-FAS 3 min タイマ 工程

みたきのルール

除水量制限

一回の透析にて血圧低下を防ぐため除水量制限（当日除水量の最大値）を設定している

除水量制限は医師指示で患者によって異なる

除水量制限<今日の除水量 の場合、引き残しとして表示される

リンス

リンスとは透析中に体に入る余分な水のこと

リンス=0.2kg（200ml）

同時脱血はA側・V側両方合わせて約100mlの除水（脱血）を行う
返血はA側・V側両方合わせて約300ml体内に入る
→返血時のほうが200ml多い（=**体内へ200ml入る**）

そのため200ml余分にリンス分として除水を行う

測定用紙の一例

全て除水量制限3.2kg

DWからの増加量+リンス=除水目標値+引き残し

↳ 【前】 体重 - DW

2024/02/17 (土) 18:46:21

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】 体重 : 72.5 kg

除水目標値 : 2.7 kg

引き残し : 0.0 kg

読み方

$$72.5\text{kg} - 70.0\text{kg} = 2.5\text{kg}$$

【前】 体重 DW DWからの増加量

$$2.5\text{kg} + 0.2\text{kg} = 2.7\text{kg} + 0.0\text{kg}$$

DWからの増加量 リンス 除水目標値 引き残し

除水量制限 > 除水目標値 のため引き残し0.0kg

2024/02/17 (土) 18:45:56

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】 体重 : 73.3 kg

除水目標値 : 3.2 kg

引き残し : 0.3 kg

$$73.3\text{kg} - 70.0\text{kg} = 3.3\text{kg}$$

【前】 体重 DW DWからの増加量

$$3.3\text{kg} + 0.2\text{kg} = 3.2\text{kg} + 0.3\text{kg}$$

DWからの増加量 リンス 除水目標値 引き残し

除水量制限 < 除水目標値 のため引き残し0.3kg

※この患者は3.5kg除水すればDWまで達する

2024/02/17 (土) 18:46:44

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】 体重 : 69.5 kg

除水目標値 : 0.0 kg

引き残し : 0.0 kg

コンソールの設定上の注意点

増加量にリンス分(0.2kg)を足した除水目標値が
0.1kg以上の場合は0.2kgが自動で加算
除水目標値が0.0kg以下の場合は0.2kg加算されない

$$69.5\text{kg} - 70.0\text{kg} = -0.5\text{kg}$$

【前】 体重 DW DWからの増加量

【前】 体重 < DW のため除水目標値0.0kg

リンス(0.2kg)は加算されていない