


接続意識付け（接続チェック）

シャントとは



実際の患者接続部

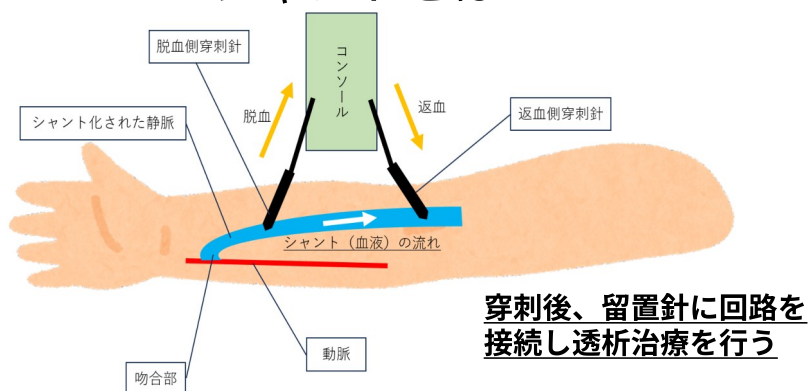

接続の押し込みがゆるいor締めが弱いと
治療中に留置針と回路が抜けてしまい
大出血となる（過去抜けた事例あり）

接続がゆるみなく行えるよう
毎朝意識付けのためのチェックを必ず行う

かご（メインステーション）



（鉗子は接続が
硬く外れない
場合に使用）

2種類（左から）

- ・ 穿刺針+三方活栓+回路
- ・ 穿刺針+回路



（三方活栓はシングルニードルモード時使用）

手順

- ① 2種類接続を行ったらその場で
他スタッフに声かけし、ゆるみ
がないか確認してもらう
- ② 自分の名前にチェックを入れる