


< 警報 >

- ・ 静脈圧
- ・ 透析液圧
- ・ 気泡

静脈圧

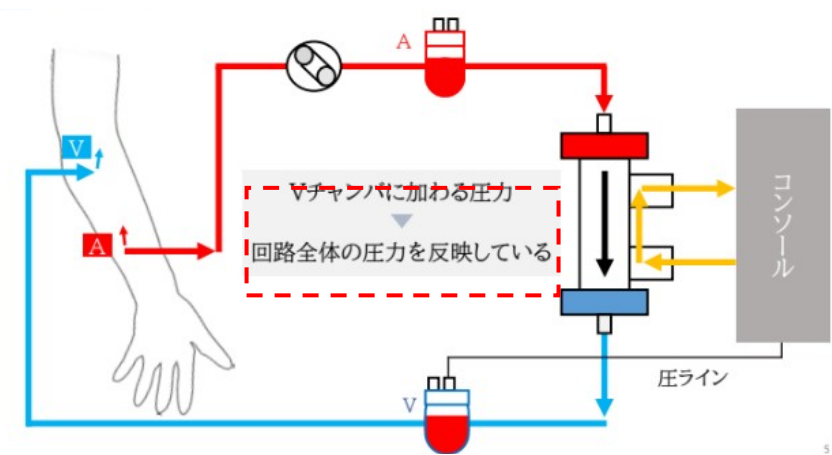

① 静脈圧上限

原因	対応
V 針先の凝血付着	針先洗浄
V 針・V 側回路の折れ曲がり ・ 患者が腕を曲げたとき ・ 回路固定での回路のねじれ	原因の解除
V 針が血管壁に当たっている・挿入不足	エコーで針先の確認・針先修正
V チャンバーの凝血	抗凝固薬の注入忘れ・持続量の不足
V チャンバーの濃縮	再循環の所見がないか確認


②静脈圧下限

原因	対応
A 針先の凝血付着	針先洗浄
脱血不良 ・ 穿刺場所のフローが少ない ・ A 針が血管壁に当たっている ・ A 針が血管まで到達していない ・ 血圧低下 ・ 脱血針の折れ曲がり	QB を下げる・再穿刺・駆血 エコーで確認・針先調整 エコーで確認・押し込んで血管を切る・再穿刺 除水停止・補液 針固定の調整
A 側回路（V チャンバーまで）の折れ曲がり ・ 患者が腕を曲げたとき ・ 回路固定での回路のねじれ	原因の解除
ダイアライザー・A チャンバーの凝血	凝血確認・ダイアライザー及び回路交換（ME 対応）
A 針の抜針	再穿刺・V 針でシングルニードルモードへの切り替え
V 針の抜針	再穿刺・A 針でシングルニードルモードへの切り替え

透析液圧

ダイアライザー内で静脈圧（血液側の圧力）を

押し返す力が透析液圧

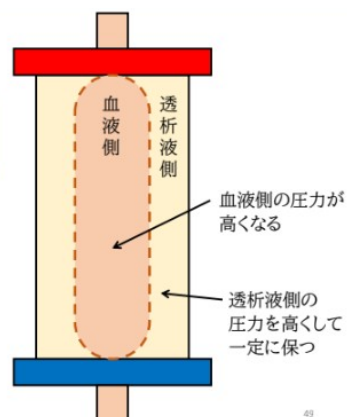

厳密には違うが、

静脈圧≡透析液圧（値は異なる）というイメージで OK

③透析圧上限

原因	対応
静脈圧上限に伴うもの	静脈圧上限と同じ対応を行う
ダイアライザー出口～Vチャンバーまでの回路の折れ曲がり	折れ曲がりを解除

④透析圧下限

原因	対応
静脈圧下限に伴うもの	静脈圧下限と同じ対応を行う
ダイアライザーの目詰まり	ダイアライザー交換（ME 対応）
オンライン HDF の場合	補液速度を下げる（ME 対応）

気泡

⑤動脈側気泡

原因	対応
----	----

脱血不良（回路内に陰圧がかかり気泡発生）	静脈圧下限 脱血不良 参照
A 側針の抜針	再穿刺・V 針でシングルニードルモードへ切り換え

→A チャンバーまで気泡を送り透析を再開

⑥静脈側気泡

原因	対応
脱血不良（回路内に陰圧がかかり気泡発生）	静脈圧下限 脱血不良 参照
V チャンバーが空になった	V チャンバーの液面をためる（ME 対応）

→V チャンバーまで気泡を送り透析再開

その他の警報対応は ME からのコンソール取り扱い配布資料参照

内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。